


SARS-CoV-2 CE

Antigen Rapid Test Kit

[Colloidal Gold Immunochromatography]

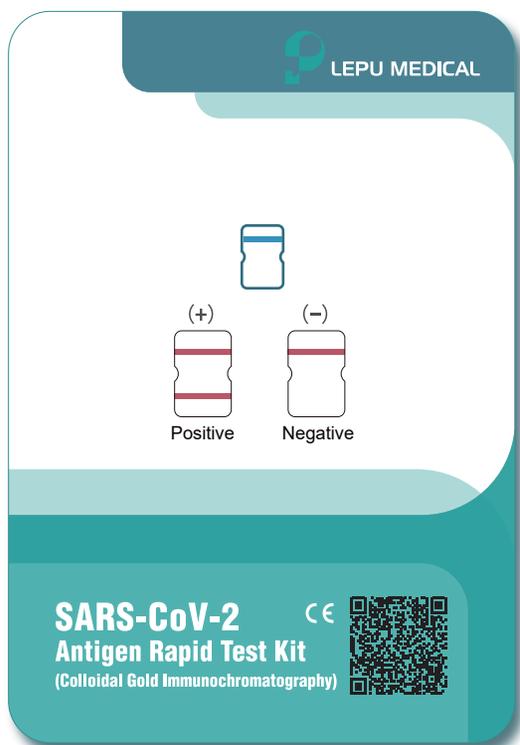

- ① Nicht-invasiv
- ② Einfach in der Anwendung
- ③ Bequem, keine Geräte erforderlich
- ④ Schnell, Ergebnis in 15 Minuten
- ⑤ Zuverlässig, mit hoher Genauigkeit
- ⑥ Kostengünstig, wirtschaftlich



Hospital
Spital



Test Site
Test Stelle



Airport
Flughafen



Station
Bahnhöfe



Hotel
Hotel






Corporation
für Unter-
nehmen



Mass
Screening
Massenscreening



Anleitung

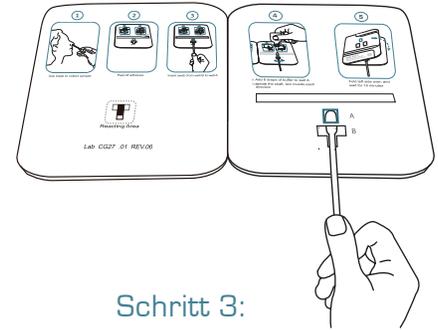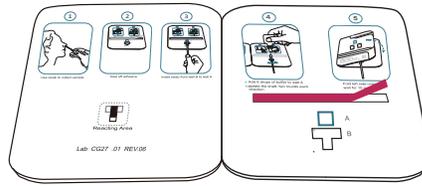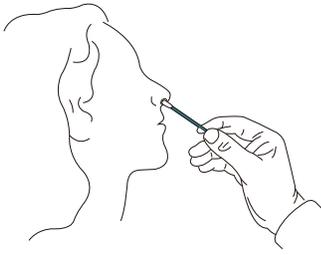

Schritt 1:



- Stieltupfer NUR 2 Zentimeter in die Nasenhöhle stecken
- Stieltupfer 5 Mal im Kreis drehen
- Nasenhöhle wechseln, Drehen wiederholen

Schritt 2:

Schutzabdeckung des Klebestreifens entfernen

Schritt 3:

Probe in die Öffnung schieben

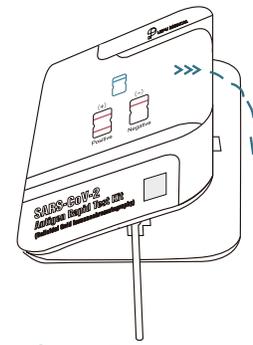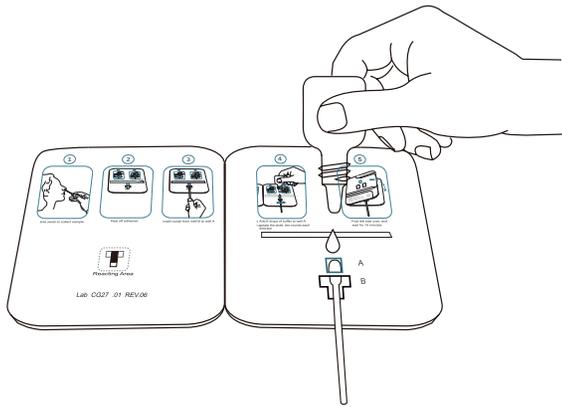

Schritt 4:

6 Tropfen der Lösung in die Vertiefung geben und den Stieltupfer 2 Mal in jede Richtung drehen.

Schritt 5:


Linke und rechte Seite zusammenkleben. Das Testergebnis erscheint innerhalb von 15 Minuten.



Ergebnis Auswertung

Positiv

(+)

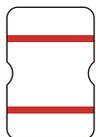


Negativ

(-)



Ungültig

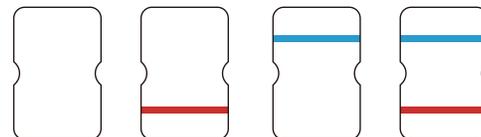

BEIJING LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Building 7-1 No.37 Chaoqian Road, Changping District, Beijing, 102200, P.R.China

Tel: +86-10-8012 3964

Email: lepuservice@lepumedical.com

Web: en.lepumedical.com

Importeur und Vertrieb:

True Sky HandelsgmbH

Margareten Gürtel 52-56/5/19

A-1050 Wien, Austria

Tel.: +43 720788630

E-Mail: officetrue-sky.com